

Agarrar la adrenalina con la mano dominante y no cambiarla de mano.


Hacer los pasos siguientes.

Una vez oído el click, mantener 5-10 segundos y luego dar masaje 10 segundos.



Altellus (150, 300):

1. Quitar la tapa azul.
2. Apoyar la parte naranja en el muslo y presionar hasta oír un click

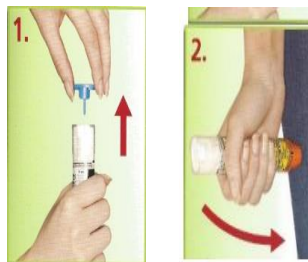

Video: <http://www.youtube.com/watch?v=1JndtEff-tw>

Anapen (150, 300):



1. Quitar la tapa negra.
2. Quitar la tapa gris.
3. Apoyar la parte hueca en el muslo
4. Apretar el botón rojo hasta oír un click



Video: <https://www.youtube.com/watch?v=nXt7TjVoJvc>

Emerade (150, 300, 500):


1. Quitar la tapa blanca.
2. Apoyar la parte hueca en el muslo y presionar hasta oír un click

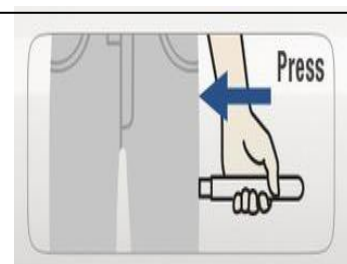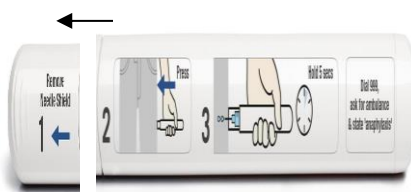

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=8dLthER4YZk>

Jext (150, 300):

1. Quitar la tapa amarilla.
2. Apoyar la parte negra en el muslo y presionar hasta oír un click

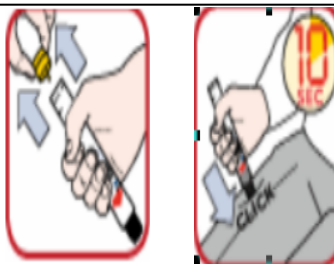

Video: <http://www.youtube.com/watch?v=MhFnwz3PEHo>